

取扱説明書



パラレルDX TB-534-02 パラレルSD TB-534-01 パラレルBX TB-1180 小児パラレルDX TB-1194 パラレルWX TB-1212

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
ここに示した事項は製品を安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

安全上のご注意

●ご使用の前に必ずお読み下さい。

区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	平行棒を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置して下さい。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと平行棒が転倒する恐れがあります。
	滑りやすい床面や濡れている床面では平行棒が動く恐れがあります。
	平行棒を火気に近づけないでください。
	湿気の多い所や、雨・風の当る所に平行棒を放置しないでください。
	平行棒は歩行訓練以外の目的で使用しないでください。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。
	手すりにもたれたり、片方だけに強い負荷をかけないでください。転倒する恐れがあります。
	本製品をご使用になる場合、お一人でご使用しないでください。必ず付添人の元でご使用ください。

注意	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認下さい。
	高さ調節時、指などを挟まないようにご注意ください。
	本製品は一人用です。複数人で同時に本製品をご使用にならないでください。転倒する恐れがあります。

付 属 品

組立を行う前に、下記付属品お確かめください。

- 六角セムス(×4)
- スパナ(×1)


株式会社 高田ベッド製作所

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜2番地27
TEL.072-484-8800 (代)
URL <http://www.takada-bed.co.jp>
お客様相談室：フリーダイヤル **0120-62-2382**

各部の名称および使用方法

パラレルDX

手すり▼

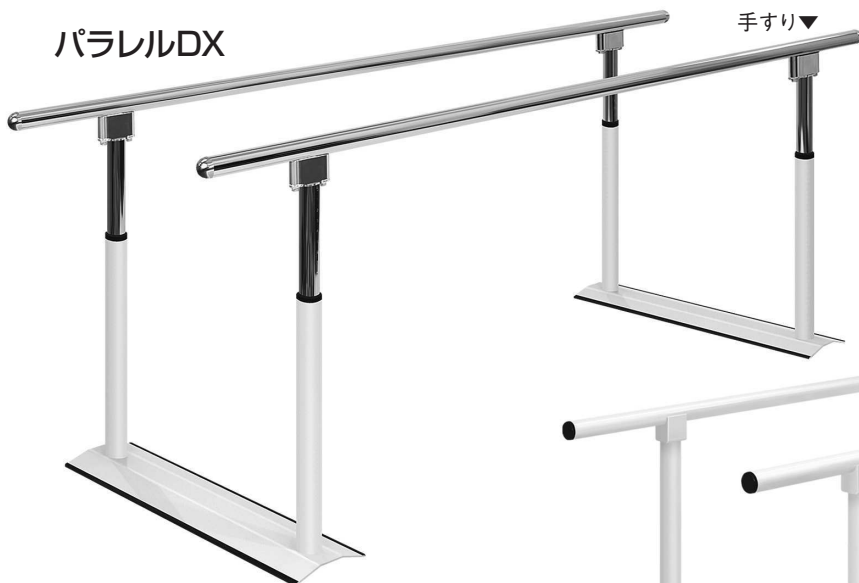

パラレルSD

手すり▼



パラレルDX 高さ調節方法

手すりを上げる場合（高くする時）

手すりの両端をお二人で持ちながら、カチッと音がするまで手すりを持ち上げてください。
これで1段高くできますので、お好みの高さまで段数を上げてください。その際、伸縮ボールの側面に目盛りが刻まれていますので、同じ高さになっていることをご確認ください。

手すりを下げる場合（低くする時）

手すりを最上段まで上げるとロックが解除し、ゆっくり手すりが下がります。
手すりを一番下まで下げるとカチッと音がして、ロックが掛かります。

ご注意！

※歩行訓練中に決して手すりを引き上げないでください。

ロックが解除され利用者が転倒する恐れがあります。


※ご使用前には手すりがロックされている事を必ずご確認ください。

※本製品は軽度の障害患者様向けの簡易製品です。

ご使用中は介助者等が必ず付き添ってください。

組立方法▶

右図のように、土台と支柱を六角ボルトで固定してください。

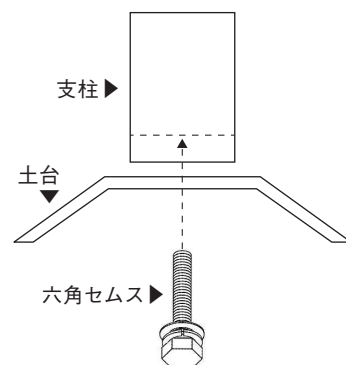

パラレルSD（高さ固定式）

◀手すり

①手すりに付いているボルトに支柱を取付けます。

②支柱を反時計回りに回し、取付けてください。

③支柱に手すりを取付けた後、付属のボルトで土台を取付けてください。（4カ所）

▼土台

パラレルDX

手すり▶

15段階切替
最大30cmの高さ調節
(2cm間隔)

付属のボルトで手すりに土台を取付けてください。（4カ所）

▼土台

